

Kompaktní a snadná údržba

Odsávačka Clario je spolehlivým prostředkem k uvolňování dýchacích cest.

OBLAST POUŽITÍ

Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest.

Ideální pro používání doma i na cestách, v ambulancích, sanitních vozech, LDN a lůžkových odděleních.

Hygiena a nezávislost kdekoli

TROJNÁSOBNÝ HYGIENICKÝ KONCEPT

- plovák v láhvi zabraňuje přesátí
- integrovaná bezpečnostní komora pro zachycení odsáté tekutiny v případě přesátí
- uzavřený membránový systém zamezuje vniknutí tekutiny do odsávačky

VÍCE VOLNOSTI A POHYBU

- napájení síťové, bateriové, možnost připojení adaptérem na autobaterii
- praktická osobní brašna

SNADNÁ OBSLUHA

- pouze dva ovládací prvky
- jednoduchý třístupňový regulátor intenzity odsávání

PŘEDNOSTI

- snadná údržba
- tichý provoz
- malá, lehká, praktická, vhodná i na cesty



SPECIFIKACE

- efektivní sací výkon: min. 15 l/min
- podtlak: až - 73 kPa
- membránový regulátor vakua se 3 stupni nastavení:
 - minimum 13 mmHg, -18 kPa
 - medium 266 mmHg, -36 kPa
 - maximum 595 mmHg, -80 kPa
- světelná indikace chodu
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- verze: síťová nebo síťová/bateriová
- možnost připojení na autoadaptér

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- bezpečnostní komora
- víčko a lahev 0,5 l (nelze autoklávovat)
- jednorázová odsávací hadice
- síťový adaptér

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- autoadaptér
- přenosná brašna (u typu DeLuxe již v ceně společně s náhradní láhví a víčkem)

ZÁRUKA


2 roky

OBJEDNACÍ ČÍSLA:

N014.0014
Clario - AC



N014.0114
Clario - AC / DC

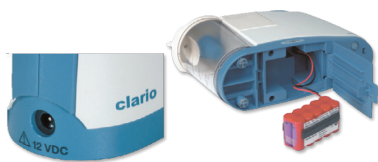

N014.0214
Clario - AC / DC DeLuxe



TECHNICKÁ DATA

Klasifikační třída	IIa
Hmotnost	1,7 kg
Rozměr	230 × 98 × 254 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	110 W



DN FORMED
BRNO s.r.o.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz