

# Triango LED

Svítidlo operační a zákrovové - LED



LED 30 C



LED 30 W





LED 30 F

Předností tohoto svítidla je energetická úspora a vysoký světelný výkon díky moderní LED technologii. Možnost plynulé regulace intenzity osvětlení řadí Triango do kategorie jak operačních tak vyšetřovacích svítidel.

- špičková švýcarská kvalita
- moderní LED osvětlovací technologie - 7 LED diod
- vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění
- nastavitelná intenzita osvětlení v 5ti stupních 10% až 100%
- téměř žádné infračervené záření (bez tepelného sálání)
- 3 klouby, úhel otočení hlavy svítidla 360°
- všechny klouby jsou fixovány speciálním balančním systémem
- světelná indikace intenzity osvětlení a zapnutí svítidla
- transparentní kryt LED diod - abraziodolný
- snímatelný držák, sterilizovatelný
- uchycení na strop s možností úpravy délky vertikálního úchytu 30 - 120 cm při montáži
- variabilní – verze stropní, nástěnná nebo pojízdná



| TECHNICKÁ DATA         |  |
|------------------------|--|
| žárovka                | LED - životnost 30 000 hodin   |
| světelný výkon         | 50 000 lux / 1,0 m   |
| světelné pole          | Ø 17 cm / 1,0 m  |
| intenzita osvětlení    | 5 stupňů 10 - 100 %  |
| teplota chromatičnosti | 4500 K   |
| index podávání barev   | Ra > 95  |
| příkon                 | 100-240 V, 50/60 Hz  |
| výkon                  | 30 W   |
| hmotnost               | 30C – 13 kg, 30W – 13 kg,<br>30F – 20 kg   |
| materiál               | PC – ABS (polycarbonate – acrylonitrile butadiene styrene kopolymer)                       |
| vypínač                | dotykový I / 0 + regulátor intenzity světlení  |
| třída bezpečnosti      | I  |
| normy                  | EN60601-1, EN60601-2-41  |
| speciální vlastnosti   | sterilizovatelný držák   |
| upevnění               | 30C – stropní, 30W - nástěnná, 30F – pojízdná  |
| volitelné              | u stropní verze adaptér do stropního podhledu, možnost délky vertikálního úchytu 30-120 cm |

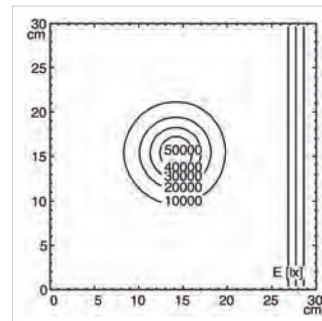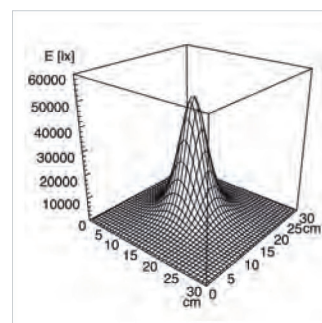

svítivost

## OBJEDNACÍ KÓDY

| OBJ. Č.      | NÁZEV ZBOŽÍ                                 |
|--------------|---|
| ND15.170.000 | Svítidlo TRIANGO LED 30 C stropní 1 ramenné |
| ND15.175.000 | Svítidlo TRIANGO LED 30 W nástěnné          |
| ND15.171.000 | Svítidlo TRIANGO LED 30 F pojízdné          |