

## Modulární a kompatibilní

Jednoduché použití při zachování maximální bezpečnosti

### LÁHVE

- vyrobeny z velmi kvalitního polysulfonu odolného proti nárazu a vysoké teplotě - možnost autoklávování do 134°C
- objem lahví: 0,25, 0,5, 1, 2, 3 a 5 litrů
- možnost propojení do série
- variabilní držáky lahví



### VÍČKA

- víčka s integrovaným těsněním jsou vylišována z jednoho druhu materiálu – polysulfonu
- díky této speciální technologii nedochází k nežádoucímu prnutí materiálu při následném autoklávování
- pojistný ventil zabraňuje přesátí
- víčko velké – pro láhve 1, 2, 3 a 5 litrů
- víčko malé – pro láhve 0,25 a 0,5 litru




*víčko velké*

*víčko malé*

### FILTRY

- filtr bakteriologický autoklávovatelný s výměnnými jednorázovými vložkami
  - snižuje náklady na spotřební materiál
- filtry jednorázové
  - bakteriologické, proti přesátí, uhlíkové protipachové

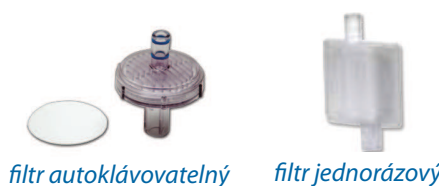

*filtr autoklávovatelný*

*filtr jednorázový*