


# Vario 18

Vysoká kvalita a bezpečné odsávání

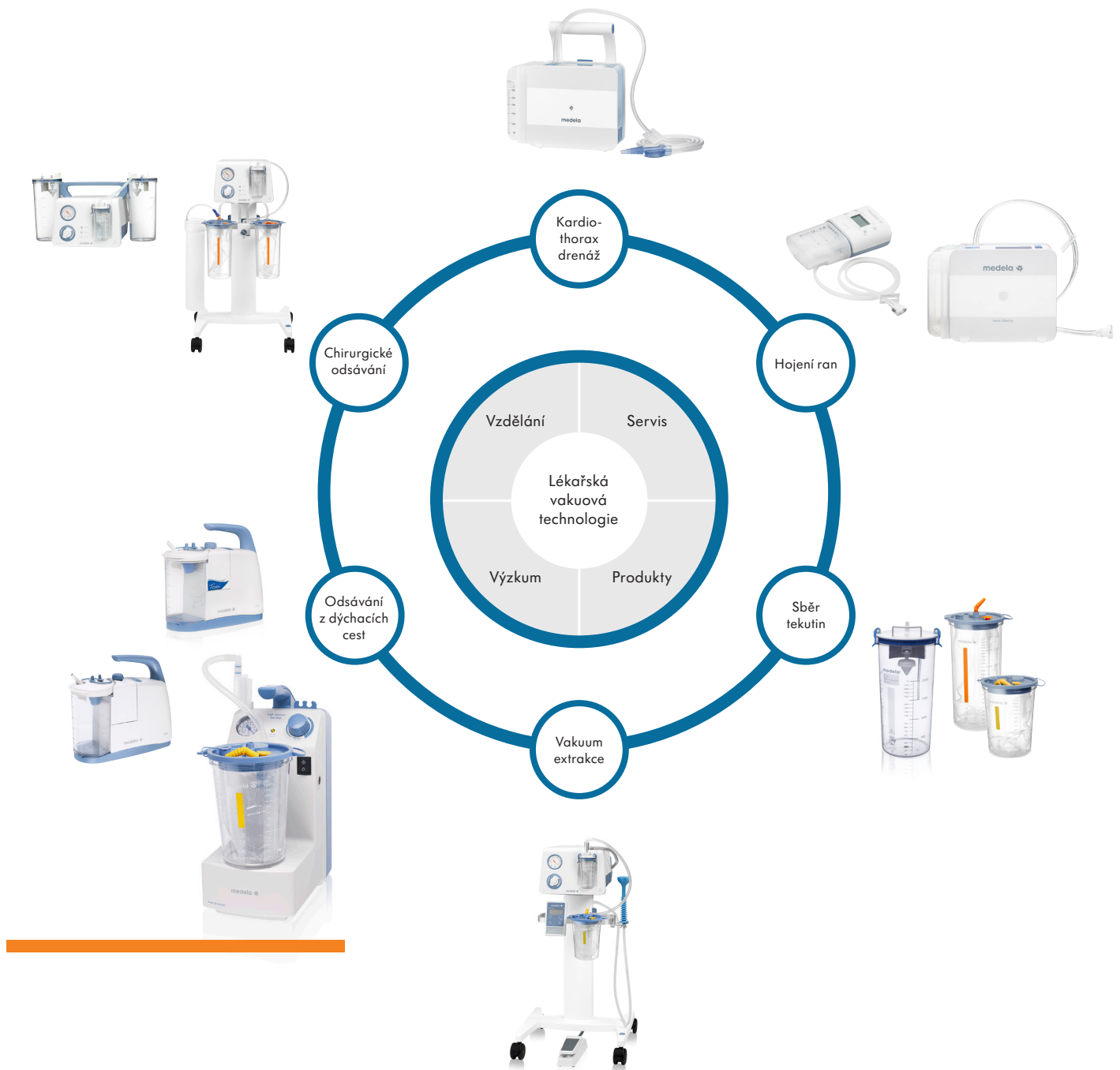

# Vario 18

## Všestranná a mobilní

Odsávačka Vario 18 nabízí nízkou hladinu hluku, spolehlivý výkon a mobilitu.

**Bateriová verze** je ideální pro přepravu pacientů.

### Oblast použití

Odsávání z dýchacích cest a malé chirurgické zákroky. Vhodná pro lůžková oddělení, JIP, ambulance, pečovatelskou službu, privátní praxi, sanitní vozy, domácí péči.

Vysoká bezpečnost odsávání je zajištěna aretačním tlačítkem, které zabraňuje náhodnému přenastavení vakua.








Pojízdná verze



### RYCHLÁ FAKTA

- rychlé vytvoření podtlaku speciální pístovou technologií QuatroFlex
- přesné nastavení vakua membránovým regulátorem
- bezpečnostní aretační tlačítko zabraňuje náhodnému přenastavení vakua
- možnost uchycení na eurolištu nebo na vozík s eurolištu
- Integrované držáky odsávací hadice a lahví
- madlo pro snadnou manipulaci
- napájení síťové (AC) nebo síťové/bateriové (AC/DC) 30 min.
- připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
- snadné nastavení, použití a čištění
- tichý provoz bez vibrací
- dlouhá životnost
- malá, lehká, praktická
- doporučeno použití virových filtrů Medela

### TECHNICKÉ ÚDAJE

	Podtlak	-75 kPa / -563 mmHg ( $\pm 10\%$ )
	Průtok	18 l/min.
	AC AC/DC	3.5 kg 4.2 kg
	VxŠxH	380x170x285 mm
	Výdrž baterie	30 minut
	Záruka	2 roky
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
	Výkon	80 W
	ZP	IIa

## SPECIFIKACE

- průtok: 18 l/min
- podtlak: -75 kPa
- čtyřpístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua - technologie QuatroFlex
- bezolejový systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- blokáce nastaveného vakua
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- integrovaný držák odsávací hadice
- dva integrované držáky lahví
- světelná indikace chodu odsávačky
- tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání
- bezúdržbový provoz
- min. dvoustupňová ochrana proti přesátí
- barevně značený manometr
- VIRUS filtr kombinovaný s ochranou proti přesátí
- možnost připojení pojistné nádoby s víčkem proti přesátí – polysulfonové, autoklávovatelné
- možnost upevnění na eurolištu
- možnost upevnění na vozík s eurolištu
- napájení: síť (AC) nebo síť/baterie (AC/DC)
- provoz na baterii 30 – 120 min. dle nastaveného podtlaku (u verze AC/DC)
- možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)

## ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ







- 5x virový filtr kombinovaný proti přesátí, jednorázový
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 25 cm
- 1x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x spojka propojovací 90°, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm
- 1x baterie NiMH (u verze AC/DC)

## OBJEDNACÍ ČÍSLO

N026.2112 MEDELA Vario 18 AC 2 roky  
 N026.5112 MEDELA Vario 18 AC/DC 2 roky

## ZÁRUKA

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	<b>N077.0511</b>	<b>Vozík s eurolištu pro odsávačku Vario a centrální sání</b> Pětiramenný, brzděná kolečka
	<b>N077.0821</b>	<b>Držák se šroubem na eurolištu, 10 x 25 mm</b> Pro uchycení odsávačky Vario na eurolištu
	<b>N077.0105</b>	<b>Adaptér pro láhev na Medela vak</b> Adaptér slouží k uchycení láhve pro Medela vaky
	<b>N077.0831</b>	<b>Brašna</b> Pro bezpečnou přepravu Varia a příslušenství Pevné pouzdro s ramenním popruhem a kapsami
	<b>N077.0832</b>	<b>Kabel pro připojení na autobaterii</b> Pro provoz odsávačky Vario AC/DC v autě 12V DC kabel
	<b>N077.0743</b>	<b>Košík k vozíku odsávaček</b>
<b>Sběrný systém</b>	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve).	

Podrobný přehled příslušenství - viz kompletní katalog Medela.

**Výrobce:**

**Medela AG**

Lättichstrasse 4b  
6341 Baar / Switzerland

**Distributor a servisní středisko:**

**DN FORMED Brno s.r.o.**

Hudcova 76a  
612 00 Brno  
Telefon: 770 144 113  
E-mail: [chirurgie@dnformed.cz](mailto:chirurgie@dnformed.cz)  
[www.dnformed.cz](http://www.dnformed.cz)

