



DN FORMED
BRNO s.r.o.

Profesionální infiltrační systémy

Technologie nejvyšší kvality pro plastické chirurgie



Katalog

NOUVAG⁺

Made in Switzerland



Nouvag - Made in Switzerland

Cesta kvality a služeb

Švýcarská společnost NOUVAG AG, která byla založena v r. 1971, je dynamická, inovativní mezinárodní společnost s vysokými standardy kvality při výrobě zdravotnické techniky.

Hlavní roli hraje zejména v oblasti zdravotnických přístrojů pro plastickou chirurgii. Díky intenzivnímu výzkumu, vysokému inovačnímu potenciálu a splnění náročných požadavků právních předpisů se jí podařilo obsadit vedoucí postavení ve specializovaných oborech na světovém trhu.

Spokojené zákazníky lze najít již ve 190 zemích celého světa.

Kromě výzkumu, vývoje a výrobních norem, které splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu, klade velký důraz na prezentaci a profesionální přístup obchodních manažerů.

Veškeré produkty splňují požadavky mezinárodních průmyslových norem a jsou označovány značkou EU v souladu se směrnicí 93/42/EEC pro zdravotnické produkty a přístroje.

Obsah

Infiltrační pumpa Dispenser DP 30	4
Infiltrační pumpa Dispenser DP 30 LipoPlus	5
Kompaktní vibrační systém s infiltrační pumpou LipoSurg	6 - 7
Infiltrační sety a jehly	8
Odsávací kanyly	9

DP 30 Dispenser

Infiltrační pumpa vč. pedálu Vario

OBLAST POUŽITÍ

Cévní chirurgie - angiologie, dále pak artroskopie, laparoskopie, endodoncie, endoskopie, ureteroendoskopie, gastroenterologie a další aplikace.

Otáčky lze snadno regulovat nožním pedálem Vario. Možnost použití námi dodávaných infiltračních nerezových kanyl výrobce DUFNER nebo infiltračních jednorázových jehel SUPRA.

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- N4180 Infiltrační pumpa DP 30
- N1501 Pedál Vario k plynulé regulaci otáček
- N1770 Držák láhve s infiltračním roztokem
- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks

Další velikosti jehel na vyžádání.

ZÁRUKA

1 rok



OBJEDNACÍ ČÍSLO

N4187 Dispenser DP 30 vč. pedálu Vario - infiltrační pumpa

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Průtok	1-12,5 l/hod (210 ml / min.)
Hmotnost	2,5 kg
Rozměr	260 × 250 × 110 mm
Příkon	230 V, 50 Hz
Max. tlak	1,5 bar

DP 30 LipoPlus Dispenser

Infiltrační pumpa vč. pedálu Vario

OBLAST POUŽITÍ

Plastická chirurgie - liposukce, angiologie, artroskopie, laparoskopie, endodoncie, endoskopie, ureteroendoskopie, gastroenterologie a další aplikace.

Oproti verzi DP 30 díky svému vyššímu výkonu podává větší objem infiltrační kapaliny s optimálním tlakem. Otáčky lze snadno regulovat nožní pedálem Vario.

Možnost použití námi dodávaných infiltračních nerezových kanyl výrobce DUFNER nebo infiltračních jednorázových jehel SUPRA. Pro odsávání tukové tkáně je možné použít námi dodávanou odsávačku švýcarského výrobce MEDELA AG typ Dominant Flex s vozíkem, na kterém je instalován nastavný držák pro DP 30 LipoPlus.

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- N4181 Infiltrační pumpa DP 30 LipoPlus
- N1501 Pedál Vario k plynulé regulaci otáček
- N1770 Držák láhve s infiltračním roztokem
- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks

Další velikosti jehel na vyžádání.

ZÁRUKA

1 rok

OBJEDNACÍ ČÍSLO

N4163 Dispenser DP 30 LipoPlus vč. pedálu Vario - infiltrační pumpa



TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	Ila
Průtok	1-24 l/hod (210 ml / min.)
Hmotnost	3,5 kg
Rozměr	260 × 250 × 110 mm
Příkon	230 V, 50 Hz
Max. tlak	2,0 bar

Kompaktní vibrační systém s infiltrační pumpou

Navržen speciálně pro infiltrační kapaliny a odsávání tukové tkáně pomocí vibračního mikromotoru.

OBLAST POUŽITÍ

Plastická chirurgie - liposukce

Jedná se o kombinovaný systém infiltrační pumpy a mikroprocesorem řízeného vibračního motorového systému, který šetří lékaři čas, fyzickou námahu a umožňuje mu jemné provádění operačních zákroků. Průtokem až 24 litrů za hodinu urychluje infiltrační roztok. Multifunkční nožní pedál Vario umožňuje regulovat rychlost vibrace nebo průtok roztoku. Procedura tumescenční liposukce s přístrojem LipoSurg je snadná, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky.

Možnost použití námi dodávaných odsávacích kanyl s Clicasept konektorem nebo se šroubovacím konektorem. V případě používání kanyl s Clicasept konektorem je nutné spolu s přístrojem objednat i příslušný adaptér a přechodku. Výrobce nedoporučuje používat odsávací kanyly s Luer-Lock konektorem, které nejsou pro vibrační systém vhodné.

Pro odsávání tukové tkáně je možné použít námi dodávanou odsávačku švýcarského výrobce MEDELA AG typ Dominant Flex s vozíkem, na kterém je instalován nastavný držák pro LipoSurg.

Výrobce doporučuje spolu s přístrojem LipoSurg objednat sprej pro jeho údržbu a čištění, který není součástí dodávky přístroje.



ZÁRUKA

1 rok

OBJEDNACÍ ČÍSLOV

N3392 LipoSurg vč. pedálu Vario - kompaktní vibrační systém s infiltrační pumpou

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Průtok	1-24 l/hod (400 ml / min.)
Max. Tlak	2,0 bar
Frekvence Conform kanyly	2.700 – 3.600 vibrací / min
Motor Conform kanyly	Elektronický, rukojeť autoklávovatelná
Hmotnost	3,5 kg
Rozměr	260 × 250 × 110 mm
Příkon	230 V, 50 Hz

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- 1x N3362 Řídící jednotka LipoSurg
- 1x N1511 Pedál VARIO k plynulé regulaci otáček, kabel 4m
- 1x N2101 Mikromotor elektronický 21 vč. kabelu 4m
- 1x N5077 Conform násadec kanyly
- 1x N5107 Rukojeť pro Conform násadec kanyly, modrá, autoklávovatelná
- 1x N6022 Set infiltrační hadicový jednorázový, 4m, sterilní
- 1x N6026 Hadice odsávací PVC jednorázová, průměr 6,5/9 mm, 4 m, sterilní
- 5x N28857 Klip pro fixaci odsávací hadice ke kabelu mikromotoru (bal. 5 ks)
- 1x N1770 Držák láhve s tumescentním roztokem
- 1x N1170 Držák rukojeti pro odložení na stůl
- 1x N1974 Tryska ke spreji pro údržbu a čištění mikromotoru
- 1x N1958 Tryska ke spreji pro údržbu a čištění převodové kapsle

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N28557 Adaptér k Luer-Lock odsávacím kanylám (není součástí dodávky přístroje)
- N1974 Sprej pro údržbu a čištění
- N6022 Set infiltrační hadicový jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N6026 Hadice odsávací PVC jednorázová, průměr 6,5/9 mm, 4 m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N077.0900 Hadice silikonová Ø 7 x 12 mm, autoklávovatelná, metráž
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks
Další rozměry jehel: katalog a ceník na vyžádání
- Kanyly odsávací a infiltrační nerez: katalog a ceník na vyžádání

Spotřební materiál pro infiltraci

Sety infiltrační

- N6022 Set infiltrační jednoráz. pro Dispenser DP 20, DP 30, DP 30 LipoPlus, LipoSurg, 4m, sterilní - 1 ks
- N6017 Set infiltrační jednoráz. pro Dispenser DP 2000, sterilní - 1 ks
(lze použít i pro DP 20, DP 30, LipoSurg)



Jehly infiltrační SUPRA

STANDARDNĚ DODÁVANÉ VELIKOSTI NA PLASTICKÉ CHIRURGIE – LIPOSUKCE

- N15885492 Jehla infiltrační SUPRA 1,1 x 120 mm - bal. 100 ks

DALŠÍ DODÁVANÉ VELIKOSTI


- N15885092 Jehla infiltrační SUPRA 0,9 x 120 mm - bal. 100 ks, min. odběr 5 balení
- N15885292 Jehla infiltrační SUPRA 1,0 x 120 mm - bal. 100 ks, min. odběr 5 balení
- N15885691 Jehla infiltrační SUPRA 1,2 x 100 mm - bal. 100 ks, min. odběr 5 balení
- N15886260 Jehla infiltrační SUPRA 1,8 x 60 mm - bal. 100 ks, min. odběr 5 balení
- N15886280 Jehla infiltrační SUPRA 1,8 x 80 mm - bal. 100 ks, min. odběr 5 balení
- N15886510 Jehla infiltrační SUPRA 2,0 x 100 mm - bal. 100 ks, min. odběr 5 balení
- N15886511 Jehla infiltrační SUPRA 2,0 x 120 mm - bal. 100 ks, min. odběr 5 balení

Na vyžádání možnost dodání i jiných velikostí jehel.



Odsávací kanyly

Kanyly s Clicasept konektorem DUFNER - nejběžněji používané

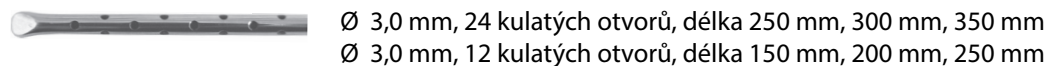

Ø 3,0 mm, 24 kulatých otvorů, délka 250 mm, 300 mm, 350 mm
Ø 3,0 mm, 12 kulatých otvorů, délka 150 mm, 200 mm, 250 mm



Ø 4,0 mm, 120°spiral profil - 2 spirály, délka 240 mm
Ø 4,0 mm, 120°spiral profil - 3 spirály, délka 240 mm, 280 mm



Ø 3,0 mm, 120°spiral profil - 2 spirály, délka 240 mm, 280 mm
Ø 3,0 mm, 120°spiral profil - 3 spirály, délka 240 mm, 280 mm



Ø 3,0 mm, 360°spiral profil - 1 spirála, délka 150 mm, 250 mm
Ø 4,0 mm, 360°spiral profil - 1 spirála, délka 250 mm



KANYLA ODSÁVACÍ MERCEDES
Ø 3,0 mm, délka 240 mm, 280 mm
Ø 4,0 mm, délka 240 mm, 280 mm



KANYLA ODSÁVACÍ BAJONETOVÁ
Ø 3,0 mm, 11 otvorů, bajonetový tvar, délka 140 mm



KANYLA ODSÁVACÍ KONICKÁ
Ø 2,0 mm, 22 otvorů + 1 dlouhý centrální, délka 150 mm



Přechodka Clicasept/Luer-Lock

Držák Mictec odsávací kanyly s otvorem a Clicasept konektorem



Všechny kanyly jsou také k dispozici s Luer-Lock konektorem.

Kompletní katalog a ceník zašleme na vyžádání.

Poznámky

Výrobce

Nouvag AG

St. Gallerstrasse 23-25
9403 Goldach
Switzerland

Distributor a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a
612 00 Brno
Telefon: 532 198 888
E-mail: dnformed@dnformed.cz
www.dnformed.cz



www.dnformed.cz